

	Formulaire	FAV-QUA-006-V001
	INFORMATION SÉCURITÉ	N° page 1/3

TITRE	FAUTEUIL F1 - STRUCTURE D'ASSISE - ACT2	FAV-QUA-006-V001	Date : 29/05/2024
REDACTEUR	CECCHINI Arnaud		

Date	29/05/2024	Coordonnées	assistance@capronpodologie.com
Produit	Fauteuils F1 2000, F1 2000 Ergo, F1 Neo, F1 Neo Ergo, F1 3000, F1 3000 Ergo		
Lot(s)	Tous les numéros de série sont concernés		
Destinataire	A l'attention de tous les utilisateurs de Fauteuil F1		

Chère Cliente, Cher Client,
 Une mesure d'action corrective de sécurité volontaire a été engagée pour les produits ci-dessous :


Désignation	Références
Fauteuil F1 2000	11500ST, 11500STTE, 11500TE, 11500DE, 11500DTE
Fauteuil F1 Ergo 2000	11550, 11550TE, 11550DTE
Fauteuil F1 Neo	11700, 11700DE, 11711, 11711DE
Fauteuil F1 Neo Ergo	11750, 11750DE, 11761, 11761DE
Fauteuil F1 3000	11004TE, 11004DTE
Fauteuil F1 3000 Ergo	11007TE, 11007DTE

Description du problème à l'origine de l'information de sécurité et risque potentiel

En relation avec la société FIMET OY fabricant de la base de fauteuil F1, il a été décelé qu'une soudure de la structure du châssis d'assise pouvait présenter une possible défaillance et entraîner un basculement du dossier vers l'arrière avec un risque de chute du patient.

Mesure à prendre par l'utilisateur

Installation simple d'un kit sur le châssis d'assise permettant de sécuriser la structure du fauteuil en cas de défaillance. Ce kit est composé de 2 pièces, 5 vis d'assemblage, une clé de serrage. Le kit a été conçu pour être installable par le praticien avec ou sans assistance technique de Capron Podologie à l'aide de la notice d'assemblage fournie.

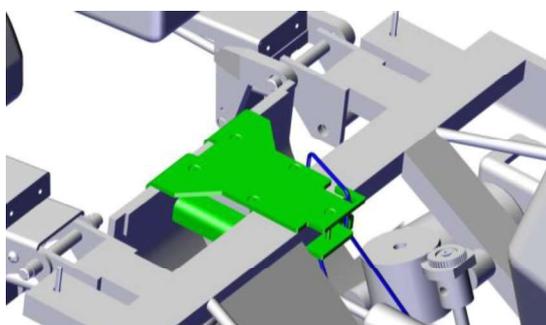

La mise en place de ce kit de sécurisation est à effectuer sans délai, et au plus tard le 31 Juillet 2024

Nous vous demandons de bien vouloir accuser réception de cette information de sécurité ainsi que de la mise en place du kit de sécurisation dès réception en répondant au formulaire en Annexe I et Annexe II ci-après.

CAPRON PODOLOGIE confirme que les autorités règlementaires concernées ont été informées de cet avis de sécurité.

Notre service Qualité se tient à disposition à l'adresse mail dédiée : assistance@capronpodologie.com

Notre service Après-vente se tient à votre disposition pour une assistance technique par téléphone au : **03 85 77 90 69**

Soucieux de vous apporter un service professionnel, nous vous adressons nos salutations cordiales.

Arnaud CECCHINI
 Responsable Qualité

	Formulaire	FAV-QUA-006-V001
	INFORMATION SÉCURITÉ	N° page 2/3

TITRE	FAUTEUIL F1 - STRUCTURE D'ASSISE - ACT2	FAV-QUA-006-V001	Date : 29/05/2024
REDACTEUR	CECCHINI Arnaud		

Annexe I

Formulaire de réponse à l'Information de sécurité

Après avoir pris connaissance de cette notification, veuillez accuser réception de l'information de sécurité sans délai.

- Soit en répondant au questionnaire informatique ci-dessous :

<p>Accuser Réception de l'information de sécurité</p> <p>https://forms.gle/Z47Lo7NnbdyR72Dc6</p>	
---	---

- Soit en retournant le formulaire ci-dessous :
 - par email à assistance@capronpodologie.com
 - par courrier à Capron Podologie – Avenue de l'Europe 71210 Ecuisses - France

Nous accusons réception de l'information de sécurité, les utilisateurs ont été informés des mesures à prendre	
Nom - Prénom / Code ou compte client	
Date	
Signature	

	Formulaire	FAV-QUA-006-V001
	INFORMATION SÉCURITÉ	N° page 3/3

TITRE	FAUTEUIL F1 - STRUCTURE D'ASSISE - ACT2	FAV-QUA-006-V001	Date : 29/05/2024
REDACTEUR	CECCHINI Arnaud		

Annexe II

Formulaire de réponse d'installation du kit de sécurité

Après avoir pris connaissance de cette notification et mis en place le kit de sécurité sur votre fauteuil, veuillez accuser réception de l'installation de ce kit de sécurité sans délai et au plus tard le 31 Juillet 2024.

- Soit en répondant au questionnaire informatique ci-dessous :

<p>Accuser Réception de l'installation du kit</p> <p>https://forms.gle/GJrN48LVLMrVhZbW8</p>	
---	---

- Soit en retournant le formulaire ci-dessous :
 - par email à assistance@capronpodologie.com
 - par courrier à Capron Podologie – Avenue de l'Europe 71210 Ecuisses - France

Nous confirmons avoir mis en place le kit de sécurisation sur le fauteuil F1	
Nom - Prénom / Code ou compte client	
Date	
Signature	

GUIDE D'INSTALLATION INSTALLATION GUIDE

réf : F1-NU-003-V01

AJOUT KIT SÉCURITÉ STRUCTURE FAUTEUIL F1 F1 CHAIR STRUCTURE SAFETY KIT ADDED

réf : KIT-CHASSIS-F1



Attention : avant toute manipulation à l'intérieur du fauteuil, assurez-vous d'avoir débranché votre matériel

Warning : before any manipulation, make sure you have turned off your equipments



LES ÉTAPES

- Démontage de l'assise - p.2
 - selon version
- Montage du kit de sécurité
 - Le matériel - p.6
 - Assemblage du kit - p.7
- Remontage de l'assise - p.9

THE STEPS

- *Dissassembly of the seat - p.10*
 - *Depending on version*
- *Installation of the safety kit*
 - *Equipment - p.14*
 - *Kit assembly - p.14*
- *Reassemble of the seat - p.17*

1 - DÉMONTAGE DE L'ASSISE

A réaliser selon votre modèle de fauteuil

FAUTEUIL F1 2000 / FAUTEUIL F1 3000



1. Dévisser les 2 vis situées sous l'assise de part et d'autre des jambières



2. Tourner les accoudoirs vers l'extérieur et soulever les pour les enlever



3. Tirer sur chaque pièce de finition accoudoir pour les déclipser



4. Soulever l'assise pour l'enlever

5. Enlever la plaque support blanche

FAUTEUIL F1 2000 ERGO / FAUTEUIL F1 3000 ERGO



1. Dévisser les 2 vis situées sous l'assise de part et d'autre des jambières



2. Déclipser les crochets ou élastiques (selon modèles) à l'arrière de l'assise



3. Remonter les accoudoirs



4. Soulever l'assise pour l'enlever



5. Enlever la plaque support blanche



FAUTEUIL F1 NEO



1. Tourner les accoudoirs vers l'extérieur et soulever les pour les enlever



2. Tirer sur chaque pièce de finition accoudoir pour les déclipser



3. Tirer le crochet avant situé sous l'assise pour le sortir de son logement



4. Soulever l'assise par l'avant pour l'enlever

5. Enlever la plaque support blanche

FAUTEUIL F1 NEO ERGO



1. Déclipser les crochets ou élastiques (selon modèles) à l'arrière de l'assise



2. Tirer le crochet avant situé sous l'assise pour le sortir de son logement



3. Remonter les accoudoirs



4. Soulever l'assise pour l'enlever



5. Enlever la plaque support blanche



2 - MONTAGE DU KIT DE SÉCURITÉ


2.1 - MATÉRIEL

Matériel fourni

- 2 pièces métalliques
- 1 clé 6 pans
- 5 vis




2.2 - COUPER LE COLLIER MAINTENANT LE CABLE SUR LE CHASSIS

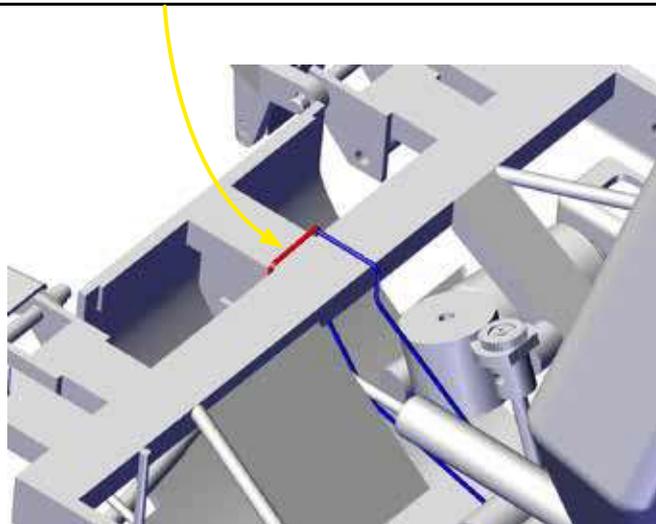

■ collier
■ câble acier


2.3 - ASSEMBLAGE ET POSITIONNEMENT DE LA PLATINE SUPÉRIEURE

- Passer le câble dans le crochet de la platine supérieure.

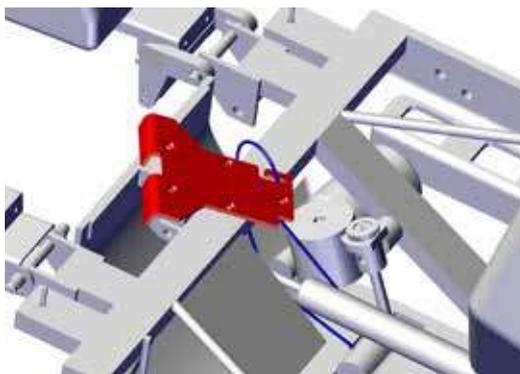

— platine supérieure
— câble acier


- Positionner la platine supérieure à plat sur le châssis, une fois la pièce en place, le câble ne peut pas sortir du crochet

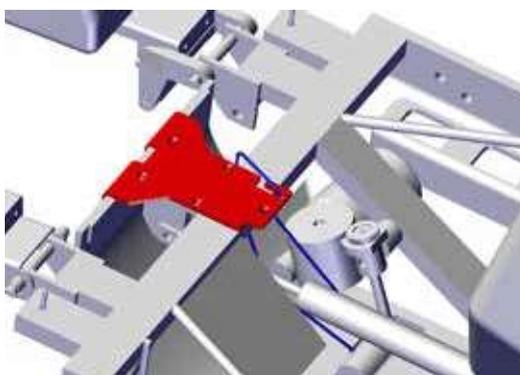

— platine supérieure
— câble acier


2.4 - ASSEMBLAGE ET POSITIONNEMENT DE LA PLATINE INFÉRIEURE

- Mettre en place la platine inférieure par l'intérieur du châssis

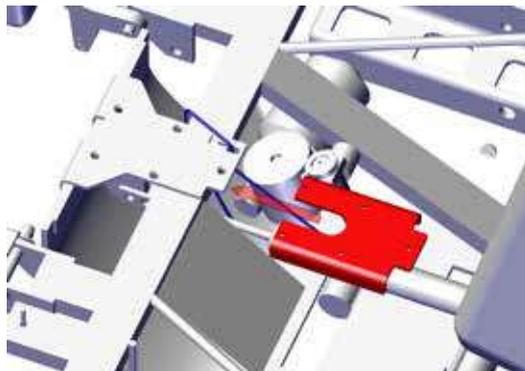


■ platine inférieure
■ câble acier

- Placer la platine inférieure de façon à prendre en sandwich le châssis entre les deux platines

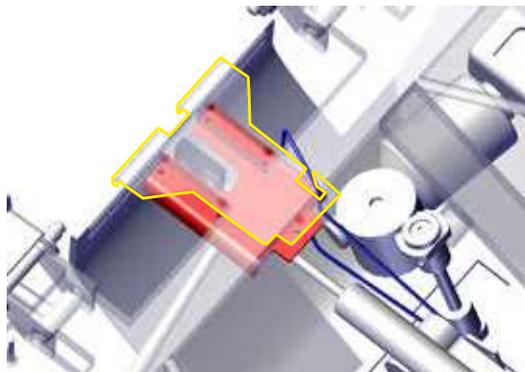


■ Platine inférieure
■ Platine supérieure
■ Câble acier

- Mettre en place les 5 vis FHC M5x35 et les serrer de façon à brider l'ensemble sur le châssis

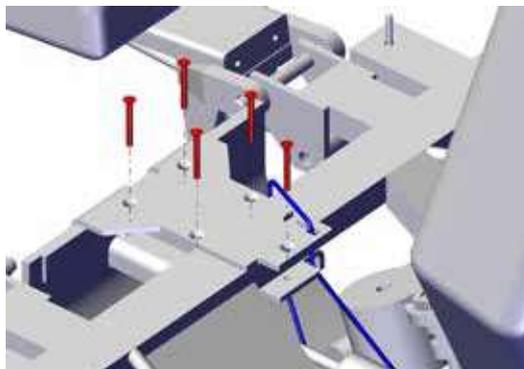

■ 5 vis fournies
■ câble acier

- Une fois le système correctement positionné et bridé, vous pouvez procéder au remontage des éléments d'assise.

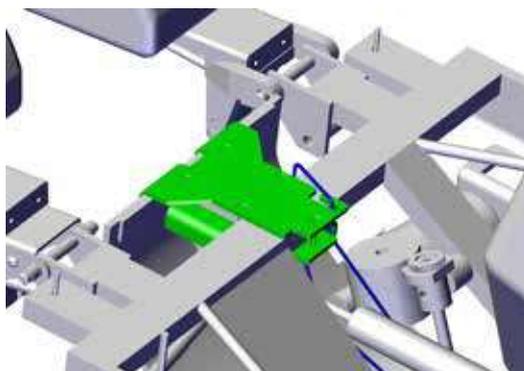

■ platines supérieure et inférieure
■ câble acier

3 - REMONTAGE DE L'ASSISE

- Procéder dans le sens inverse du démontage pour réinstaller l'assise

« Nous vous demandons de bien vouloir accuser réception de la mise en place du kit de sécurisation en répondant au questionnaire ci-après :

**ACCUSER RÉCEPTION
DE L'INSTALLATION DU KIT**




1 - DISSASSEMBLY OF THE SEAT

According to your chair model

F1 2000 CHAIR / F1 3000 CHAIR



1. Unscrew the 2 screws located under the seat on either side of the leg pads

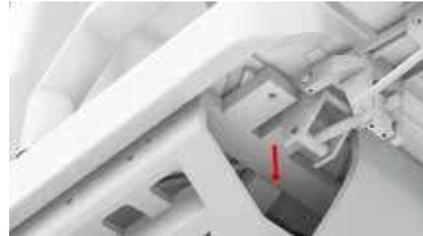

2. Turn the armrests outwards and lift them up to remove them



3. Pull on each armrest piece to unclip them



4. Lift the seat to remove it




5. Remove the white support plate

F1 2000 ERGO CHAIR / F1 3000 ERGO CHAIR



1. Unscrew the 2 screws located under the seat on either side of the leg pads

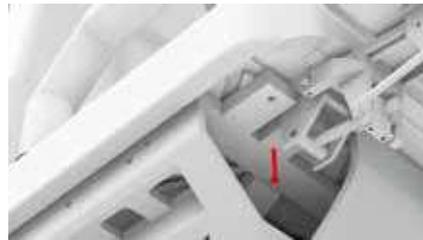

2. Unclip the hooks or elastics (depending on the model) at the back of the seat



3. Raise the armrests



4. Lift the seat to remove it



5. Remove the white support plate




F1 NEO CHAIR



1. Turn the armrests outwards and lift them up to remove them



2. Pull on each armrest piece to unclip them

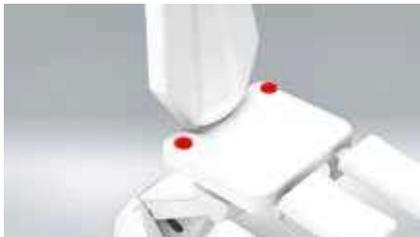

3. Pull the front hook located under the seat to remove it from its housing



4. Lift the seat from the front to remove it



5. Remove the white support plate

F1 NEO ERGO CHAIR



1. Unscrew the 2 screws located under the seat on either side of the leg pads



2. Pull the front hook located under the seat to remove it from its housing



3. Raise the armrests



4. Lift the seat to remove it



5. Remove the white support plate




2 - ASSEMBLY OF THE SAFETY KIT


2.1 - MATERIAL

Material

- 2 metal parts
- 1 hex key
- 5 screws

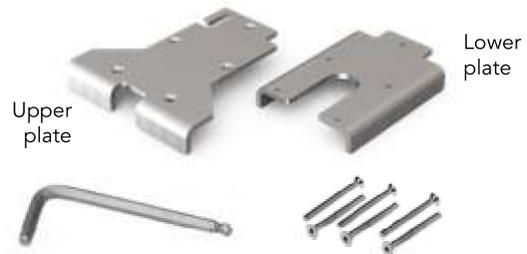


2.2 - CUT THE COLLAR HOLDING THE CABLE ON THE CHASSIS

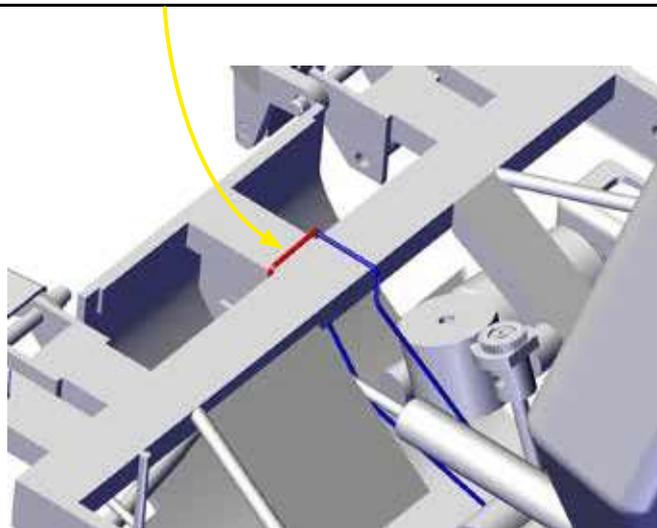


2.3 - ASSEMBLY AND POSITIONING OF THE UPPER PLATE

- Pass the cable through the hook of the upper plate

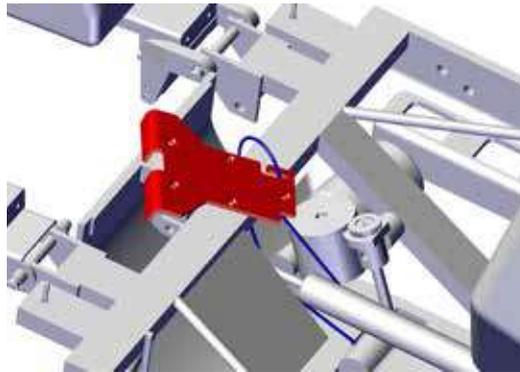

■ Higher plate
■ steel cable


- Position the upper plate flat on the chassis, once the part is in place, the cable cannot come out of the hook.

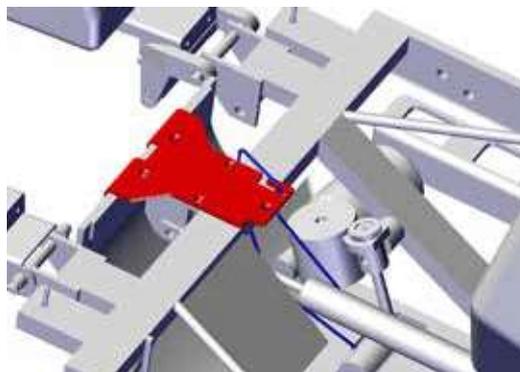

■ Higher plate
■ steel cable


2.4 - ASSEMBLY AND POSITIONING OF THE LOWER PLATE

- Place the lower plate from inside the chassis

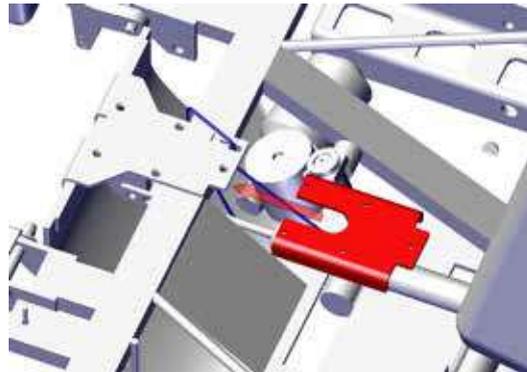


■ lower plate
■ steel cable

- Place the lower plate to sandwich the chassis between the two plates

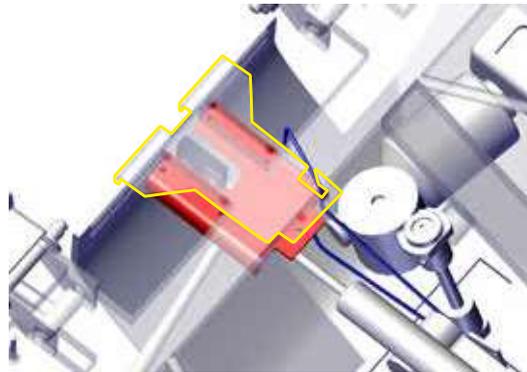


■ lower plate
■ Higher plate
■ steel cable

- Set up the 5 screws FHC M5x35 and tighten them to clamp the assembly onto the chassis

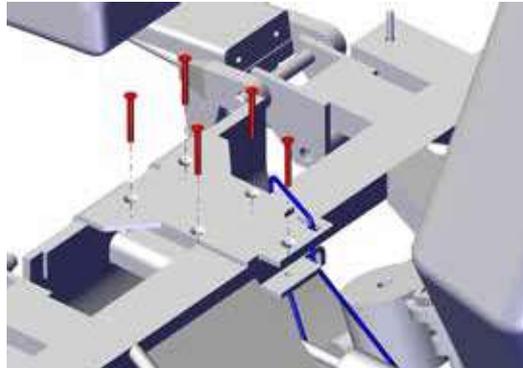

5 screws
steel cable

- Once the system is correctly positioned and clamped, you can reassemble the seat elements.

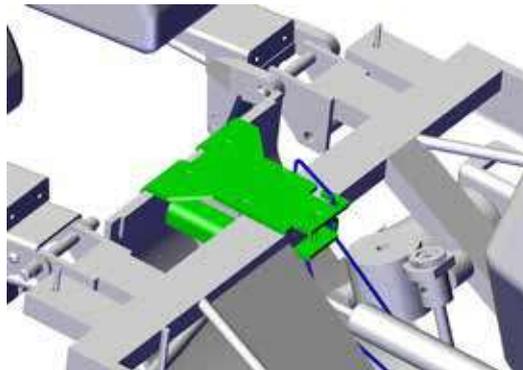

higher & lower plate
steel cable

3 - REASSEMBLY OF THE SEAT

- Proceed in the reverse order of disassembly to reinstall the seat

« we kindly ask you to acknowledge the installation of the security kit by answering the questionnaire below :

**CONFIRM THE INSTALLATION
OF THE KIT**





CAPRON Podologie

Avenue de l'Europe 71210 Ecuisses - FRANCE

Tél : +33 (0)3 85 77 90 60 - Tél - SAV : +33 (0)3 85 77 90 69

assistance@capronpodologie.com - www.capronpodologie.com