

NOTIFICATION URGENTE DE SECURITE – RAPPEL PRODUIT :
RA2025-3977961 (FA318) / RA2026-4280335 (FA319)
HeartSine® Samaritan® PAD
SAM 350P/SAM 360P/SAM 450P/SAM 500P



A l'attention du correspondant de matériovigilance et du directeur de l'établissement

18 septembre 2026

Identification FSCA : RA2025-3977961 (FA318) / RA2026-4280335 (FA319)

Type d'action : Notification Urgente de Sécurité – Rappel Produit

Modèle	Numéros de série	UDI-DI
350P 360P 500P	Une partie des numéros de série est concernée par cet avis. Veuillez vérifier si le numéro de série de votre DAE est concerné en consultant la page d'accueil de HeartSine PFA ci-dessous : https://heartsinerecall.com/HeartSineSamaritanPAD/LookUp Si votre dispositif figure sur la liste, veuillez suivre les instructions fournies dans cette lettre.	08858251002132S4

Madame, Monsieur,

Le fabricant légal Heartsine Technologies Ltd. a lancé un rappel portant sur les numéros de série des dispositifs répertoriés dans le tableau ci-dessus.

Cet avis de rappel de dispositif vise à prévenir les clients possédant des défibrillateurs Heartsine Samaritan PAD SAM 350P/SAM 360P/SAM 450P/SAM 500P de deux risques de dysfonctionnement potentiels. Par mesure de précaution, un rappel volontaire de ces dispositifs est effectué.

Description du produit

Le HeartSine Samaritan PAD est un défibrillateur automatisé externe (DAE) alimenté par batterie, conçu pour traiter les victimes d'un arrêt cardiaque.

Problème relatif au produit

1/ RA2025-3977961 - FA318 :

En mai 2025, Stryker a informé ses clients d'un problème lié au processus de fabrication d'un composant du circuit imprimé, **susceptible** de nuire au bon fonctionnement du dispositif et/ou d'entraîner une défaillance. **Ce problème a été détecté lors d'une série de tests de qualité approfondis.**

2/ RA2026-4280335 - FA319 :

Depuis votre réponse, Stryker a récemment identifié un **problème au niveau de la nappe à membrane**, un composant interne, susceptible de provoquer un dysfonctionnement intermittent. Cette défaillance peut survenir à tout moment lorsque le dispositif est chargé en préparation de l'administration du choc, pendant l'administration d'un choc ou après l'administration d'un choc. Le dispositif devient inutilisable après défaillance.

Risques potentiels

En raison des défaillances de ce composant interne, il se peut que le dispositif **ne parvienne pas** à administrer le choc prévu pendant son utilisation, ce qui pourrait entraîner un retard ou une absence de choc. Ces problèmes ont été constatés lors de procédures de remise en état et de tests de qualité, et non lors de l'utilisation sur les patients.

Aucun événement indésirable n'a été signalé en lien avec cet avis de rappel du dispositif.

Si votre dispositif rencontre l'un des problèmes mentionnés ci-dessus lors de son utilisation, veuillez-vous procurer un autre défibrillateur et contactez votre distributeur agréé ou Stryker France.

Actions requises de la part du client :

1. **Aucune autre action n'est nécessaire. Nous vous remercions pour votre réponse précédente concernant l'action corrective FA318. Votre dispositif de remplacement sera traité en priorité.**
2. Si vous ne disposez pas d'un autre défibrillateur d'accès public (PAD), Stryker vous recommande de conserver votre HeartSine Samaritan PAD en service jusqu'à ce qu'un dispositif de remplacement soit disponible. Cette recommandation repose sur des tests internes démontrant une faible probabilité de défaillance due à ce problème de fabrication produit.
3. Faites circuler le présent avis en interne et veillez à ce qu'il soit visible à proximité de l'unité concernée jusqu'à ce que toutes les actions requises aient été effectuées dans votre établissement et que l'unité ait été remplacée.
4. Informez Stryker en cas d'effet indésirable observé en lien avec l'article et le lot concerné. Nous vous rappelons la nécessité de signaler tout effet indésirable observé avec ces dispositifs à Stryker par mail à FranceRappel@stryker.com ou par fax au 04.72.45.36.65 et à l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé – direction de la surveillance – par mail à l'adresse materiovigilance@ansm.sante.fr ou par fax : 01.55.87.37.02.

Actions prévues par Stryker :

Stryker informe tous les clients ayant reçu les DAE HeartSine Samaritan PAD concernés que les actions décrites ci-dessus doivent être effectuées. Le remplacement des DAE HeartSine® Samaritan® PAD a commencé, et Stryker vous contactera avant la livraison de votre dispositif de remplacement.

Si vous avez des questions, veuillez contacter Stryker à l'adresse FranceRappel@stryker.com ou votre distributeur agréé.

Conformément aux recommandations du document Medical Device Coordination Group Guidance réf. MDCG 2023-3 et du Règlement relatif aux dispositifs médicaux UE 2017/745, nous vous confirmons que cette action corrective de sécurité sur le terrain (FSCA) a été transmise à l'ANSM.

Au nom de Stryker, nous vous remercions sincèrement pour votre aide et votre collaboration dans la mise en œuvre de cette action et sommes navrés des éventuels désagréments occasionnés.

Cordialement,

Equipe Post-Market Surveillance
FranceRappel@stryker.com
Fax : 04 72 45 36 65

Annexe A

HeartSine samaritan PAD SAM 350P/SAM 360P/SAM 450P/SAM 500P

Instructions pour identifier les dispositifs concernés

- 1) Pour trouver le numéro de série de votre dispositif et la référence du modèle, reportez-vous aux étiquettes à l'arrière du dispositif, comme indiqué ci-dessous :

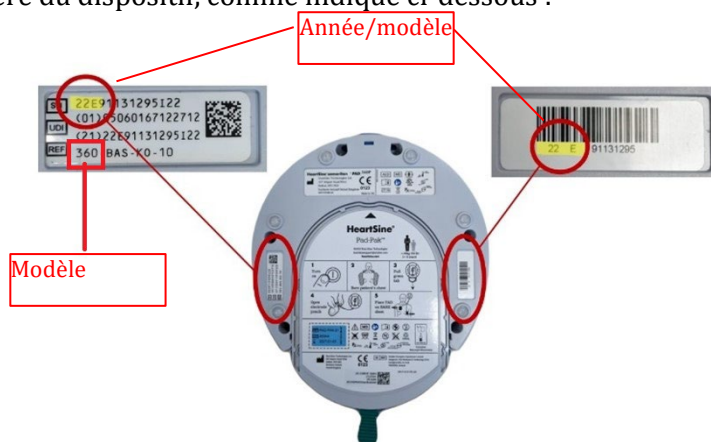


Figure 1 : emplacement du numéro de série et de la référence du modèle