

A l'attention des :
Responsables Identitovigilance
Responsables de la DSIO
Référénts applicatifs



Flash Spécial Support

M-CrossWay

Emis le : 10/11/2020

Sujet : Réf. F20201110-458078 : Anomalie des posologies standards en cas d'équivalence par classe thérapeutique

1. Versions et établissements impactés

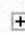
Toutes les versions M-CrossWay.

Les établissements ayant mis en place les prescriptions et la planification de soins M-CrossWay.

2. Description

a. Contexte :

Ce dysfonctionnement se produit lorsque les quatre conditions suivantes sont remplies :

- Une prescription a été saisie avec une spécialité hors livret sur l'événement en cours ou sur un événement précédent,
- Un équivalent de cette spécialité hors livret est au livret hôpital et possède au moins une posologie standard,
- Une ou plusieurs prescriptions sont sélectionnées depuis l'onglet 'Anciennes prescriptions' dont une de ces spécialités est hors livret,
- Depuis la fenêtre de sélection des équivalents, un clic est réalisé sur le symbole  présent sur les équivalents par classe thérapeutique,

b. Description :

Si les quatre conditions précédentes sont remplies, la posologie de la prescription de la spécialité hors livret est reprise lors de la sélection d'un équivalent dans la liste 'Médicaments de la même classe thérapeutique, indications pouvant être différentes (livret uniquement)'.

c. Exemple :

Soit une prescription de Fosamax 70 mg 1 comprimé à 7h et 16h, 1 jour sur 5, pendant 2 semaines prescrit le 10/06/2020 à 14h05 lors d'une hospitalisation précédente du 10/06/2020 au 16/06/2020. Cette spécialité n'est pas au livret hôpital.

Libellé	Début	Fin	Etat
ALENDRONIQUE ACIDE 70 mg (FOSAMAX), cpr 1 comprimé, 1 jour sur 5, à 7h, 16h, Voie orale, pendant 2 Semaines *** Respect de la planification médicale ***	10/06/2020 14:05	24/06/2020 14:05	A valider Der. Occ: 20/06/2020 16:00

Une nouvelle hospitalisation est programmée à partir du 10/11/2020. Pendant cette hospitalisation, la prescription de Fosamax 70 mg de l'hospitalisation précédente est sélectionnée depuis l'onglet 'Anciennes prescriptions'.

Utilisateur	Service	Hopital	Anc. presc.	Hors livret
Hospitalisation du 10/06/2020 au 16/06/2020				
Sejour du 10/06/2020 au 16/06/2020 [Héb: CHIR ORTHO HOSP, Rat: CHIR ORTHO HOSP]				
<input type="checkbox"/>		ALENDRONIQUE ACIDE 70 mg (FOSAMAX), cpr 1 comprimé, 1 jour sur 5, à 7h, 16h, Voie orale, pendant 2 Se	A valider	10/06/2020 24/06/2020

Le Fosamax 70 mg n'étant pas au livret hôpital un équivalent au livret est proposé : Lytos 520 mg avec une posologie standard.

Monographie	Equivalents	Documents	Livret	Prix de vente	G	UH
Médicament prescrit						
FOSAMAX 70 mg, cpr				3,53 €		
Médicaments de la même classe thérapeutique, indications pouvant être différentes (livr...						
M - MUSCLE ET SQUELETTE						
M05 - MEDICAMENTS POUR LE TRAITEMENT DES DESORDRES OSSEUX						
M05B - MEDICAMENTS AGISSANT SUR LA MINERALISATION						
M05BA - BIPHOSPHONATES						
M05BA06 - IBANDRONIQUE ACIDE						
M05BA07 - RISEDRONIQUE ACIDE						
M05BA05 - TILUDRONIQUE ACIDE						
M05BA01 - ETIDRONIQUE ACIDE						
M05BA02 - CLODRONIQUE ACIDE						
Clodronate de sodium 520 mg comprimé			X			
LYTOS 520 mg, cpr			X	3,77 €		
M05BA04 - ALENDRONIQUE ACIDE						
M05BA08 - ACIDE ZOLEDRONIQUE						
M05BA03 - PAMIDRONIQUE ACIDE						

Lors de sa sélection, un clic est réalisé sur le symbole de la spécialité Lytos 520 mg. Cette action détaille la posologie standard qui est de 2 comprimés le matin jusqu'à arrêt.

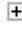
Monographie	Equivalents	Documents	Livret	Prix de vente	G	UH
Médicament prescrit						
FOSAMAX 70 mg, cpr				3,53 €		
Médicaments de la même classe thérapeutique, indications pouvant être différentes (livr...						
M - MUSCLE ET SQUELETTE						
M05 - MEDICAMENTS POUR LE TRAITEMENT DES DESORDRES OSSEUX						
M05B - MEDICAMENTS AGISSANT SUR LA MINERALISATION						
M05BA - BIPHOSPHONATES						
M05BA06 - IBANDRONIQUE ACIDE						
M05BA07 - RISEDRONIQUE ACIDE						
M05BA05 - TILUDRONIQUE ACIDE						
M05BA01 - ETIDRONIQUE ACIDE						
M05BA02 - CLODRONIQUE ACIDE						
Clodronate de sodium 520 mg comprimé			X			
LYTOS 520 mg, cpr			X	3,77 €		
2.0.0 - 2 comprimé, Matin, Voie orale, jusqu'à arrêt			X			
M05BA04 - ALENDRONIQUE ACIDE						
M05BA08 - ACIDE ZOLEDRONIQUE						
M05BA03 - PAMIDRONIQUE ACIDE						

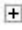
La sélection est faite sur le Lytos 520 mg pour ensuite cliquer sur 'Prescrire'. Sur la fenêtre de détail de la prescription, la posologie du Fosamax 70mg prescrit le 10/06/2020 est reprise.

Moments	Heures	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		

A noter : Si la posologie standard du Lytos 520 mg avait été sélectionnée, la posologie du Fosamax 70 mg aurait également été reprise.

3. Solution de contournement

Si au moins une prescription hors livret est renouvelée depuis l'onglet 'Anciennes prescriptions', nous préconisons de ne pas cliquer sur le symbole  dans la liste 'Médicaments de la même classe thérapeutique, indications pouvant être différentes (livret uniquement)'.

Si vous cliquez sur le symbole , il est nécessaire de contrôler la posologie avant signature de la prescription.

4. Solution définitive

Ce dysfonctionnement est corrigé dans les versions M-CrossWay :

- 8.2.6R5.6 disponible sur notre espace de téléchargement fin décembre 2020,
- 8.2.7R4.0 disponible sur notre espace de téléchargement début avril 2021.

Nous restons à votre disposition si vous souhaitez des informations complémentaires.

Cordialement,

Pour contacter votre support M-CrossWay :



<https://www.maincare.fr/extranet/home.html> (saisir votre login/mot de passe)



0825 000 454