



**A l'attention du responsable de laboratoire**

Réf : NI\_IDSARSCOV-REV\_01-02-2022-FR

Note d'information pour le produit :  
**ID™ SARS-CoV-2 / VOC Revolution Pentaplex**

(Références : IDSARSCOV-REV-100 et IDSARSCOV-REV-500)

**Concernant le réactif ARM et les différents types d'étiquetage**

**IMPORTANT : CETTE NOTE D'INFORMATION NÉCESSITE UNE  
CONFIRMATION DE LECTURE (CLIQUER SUR LE BOUTON ROUGE EN  
BAS DE PAGE).**

**Date :** 01/02/2022

Chers clients d'ID SOLUTIONS,

Par ce courrier, nous vous informons qu'à partir du lot 110, les kits **ID™ SARS-CoV-2 / VOC Revolution Pentaplex** peuvent désormais avoir deux types d'étiquetage.

Dans le tableau ci-dessous, vous retrouvez la composition des kits **ID™ SARS-CoV-2 / VOC Revolution Pentaplex**

TABLEAU COMPOSITION DES KITS **ID™ SARS-CoV-2 / VOC Revolution Pentaplex** :

COMPOSANT		RÉFÉRENCE KIT 100 réactions	RÉFÉRENCE KIT 500 réactions	COULEUR ÉTIQUETTE	DESCRIPTION
DESIGNATION	NOM	IDSARSCOV-REV-100	IDSARSCOV-REV-500		
PAC-IDSARSCOV2-REV	Contrôle d'Amplification Positif	200 µL 1 tube	200 µL 1 tube		Mélange d'acides nucléiques spécifiques du SARS-CoV-2, de la mutation L452R, de la mutation K417N, de la mutation E484K et du contrôle endogène humain.
ARM-IDSARSCOV2-REV*	Mélange Réactionnel d'Amplification	800 µL 1 tube	800 µL 5 tubes		Mélange réactionnel contenant la Reverse Transcriptase, la Taq polymérase, les amorces et les sondes d'hydrolyse pour la détection des cibles du SARS-CoV-2, de la mutation L452R, de la mutation K417N, de la mutation E484K et du contrôle endogène humain.

\*Il est à noter que désormais l'ARM-IDSARSCOV2-REV existe sous 2 formulations différentes. Néanmoins, les performances de ces deux compositions sont strictement équivalentes.

La seule différence réside en la présence ou l'absence d'une substance dangereuse.

Lorsque l'ARM-IDSARSCOV2-REV contient la substance dangereuse, celle-ci est indiquée de la manière suivante :

Sur le conditionnement secondaire :

ID™ SARS-CoV-2 / VOC Revolution Pentaplex IDSARSCOV-REV-100		
	2022/XX	<b>LOT</b> XX
<b>ARM-IDSARSCOV2-REV</b>	<b>Amplification Reaction Mixture</b> <i>Mélange Réactionnel d'Amplification</i>	XXXX
	<b>WARNING / ATTENTION</b> Contient: Tetramethylammonium chloride / Contient: Chlorure de tétraméthylammonium H412 - Harmful to aquatic life with long lasting effects. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.	
<b>PAC-IDSARSCOV2-REV</b>	<b>Positive Amplification Control</b> <i>Contrôle d'Amplification Positif</i>	XXXXX
	Product not classified as dangerous according to the regulations / Produit non classé comme dangereux selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]	
	ver XXXX www.id-solutions.fr - E-mail: info@id-solutions.fr	

ID™ SARS-CoV-2 / VOC Revolution Pentaplex IDSARSCOV-REV-500		
	2022/XX	<b>LOT</b> XX
<b>ARM-IDSARSCOV2-REV</b>	<b>Amplification Reaction Mixture</b> <i>Mélange Réactionnel d'Amplification</i>	XXXX
	<b>WARNING / ATTENTION</b> Contient: Tetramethylammonium chloride / Contient: Chlorure de tétraméthylammonium H412 - Harmful to aquatic life with long lasting effects. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.	
<b>PAC-IDSARSCOV2-REV</b>	<b>Positive Amplification Control</b> <i>Contrôle d'Amplification Positif</i>	XXXXX
	Product not classified as dangerous according to the regulations / Produit non classé comme dangereux selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]	
	ver XXXX www.id-solutions.fr - E-mail: info@id-solutions.fr	

Attention

GHS07 GHS08

Chlorure de tétraméthylammonium

H302 - Nocif en cas d'ingestion.  
H371 - Risque présumé d'effets graves pour les organes (système nerveux central) (par ingestion)  
H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

P308+P311 - EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.


P260 - Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.  
P284 - Se laver les mains, les avant-bras et le visage soigneusement après manipulation.  
P270 - Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.  
P301+P312 - EN CAS D'INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin/ en cas de malaise.  
P330 - Rincer la bouche.  
P405 - Garder sous clef.  
P501 - Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.

Sur l'étiquette du réactif ARM :

	<b>IVD</b>	
<b>ARM-IDSARSCOV2-REV</b>		
<b>Amplification Reaction Mixture</b> <i>Mélange Réactionnel d'Amplification</i>	100	<b>Warning</b> <b>Attention</b>
<b>LOT</b> XXXX	2022/XX	
Contient: Tetramethylammonium chloride / Contient: Chlorure de tétraméthylammonium H412 - Harmful to aquatic life with long lasting effects. / Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.		
ID SOLUTIONS, 1682, rue de la Valsière- Bât CapDelta - 34790 Grabels, FRANCE		

Lorsque l'ARM-IDSARSCOV2-REV ne contient pas la substance dangereuse, aucune mention de mise en garde n'est indiquée sur l'étiquette du tube d'ARM ni sur le conditionnement secondaire (cf maquette des étiquettes ci-dessous).

Sur le conditionnement secondaire :

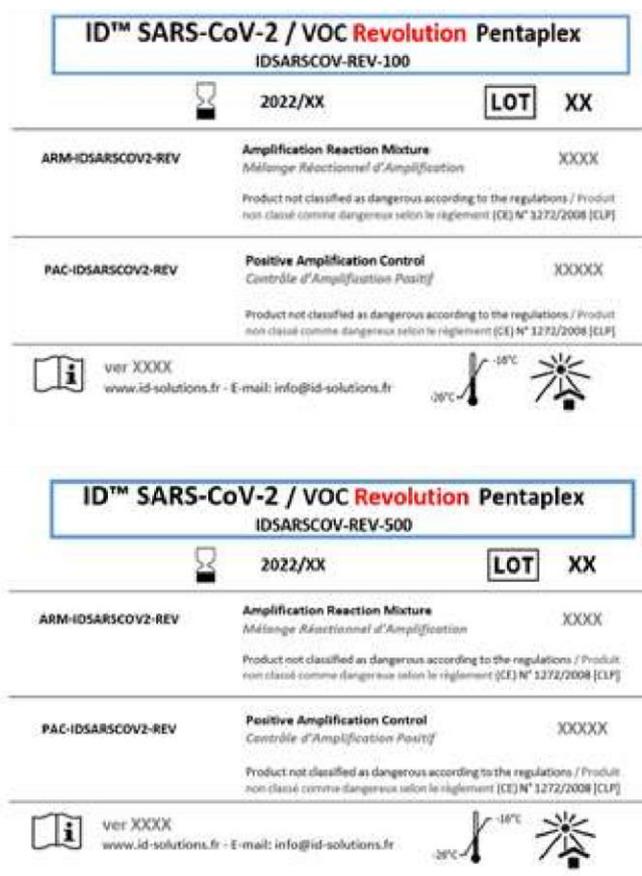

Sur l'étiquette du réactif ARM :



---

Pour toute question concernant ces informations, vous pouvez nous contacter à l'adresse mail suivante : [info@id-solutions.fr](mailto:info@id-solutions.fr)

Nous vous remercions pour votre confiance continue dans les produits ID SOLUTIONS.

Bien sincèrement,

Lise Grewis

*Présidente Directrice Générale*



## Je confirme avoir lu et pris connaissance de ces informations

*Vous recevez ce message car vous êtes client ID SOLUTIONS, ou que vous avez accepté de recevoir les actualités de l'entreprise ou des informations relatives à nos produits. Pour ne plus recevoir de messages de la part d'ID SOLUTIONS, vous pouvez vous désinscrire à tout moment [en cliquant ici](#).*

*Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données, vous disposez des droits d'opposition, d'accès, de rectification, de limitation et d'effacement, et un droit à la portabilité de vos données personnelles, en écrivant à l'adresse [dpo@id-solutions.fr](mailto:dpo@id-solutions.fr) en précisant vos noms, prénoms et adresse email.*